


**INFORMATIVNI LIST**
**Ime: REFLEXX 40**
**Datum: 30. 5. 2023 Rev: 017**
**PROIZVAJALEC**

 REFLEXX SpA  
 Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN)  
 Tel.: + 39 0375 758891 Faks: + 39 0375 464504 [info@reflexx.com](mailto:info@reflexx.com)  
[www.reflexx.com](http://www.reflexx.com)

**Imballo - Pack**

100		10	
Taglia Size	Articolo Article	Taglia Size	Cartone Carton
R40 XS	8032891631324	XS	8032891636329
R40 S	8032891631331	S	8032891636336
R40 M	8032891631348	M	8032891636343
R40 L	8032891631355	L	8032891636350
R40 XL	8032891631362	XL	8032891636367

**OPIS:** ■ rokavice s pudrom za enkratno uporabo za preglede, ne-sterilne ■ **Material:** naravni lateks ■ **Oblika:** obojestranske; pet prstov, zavihana manšeta ■ **Barva:** bela ■ **Značilnost:** gladka površina ■ **Pakiranje:** 100 kosov/škatlico; 10 škatlic/škatla ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (stopnja G1) brez lukenj; AQL 2.5 (stopnja G1) večje napake; AQL 4 (stopnja G1) manjše napake

**SKLADNOST IN UČINKOVITOST**
**Osebna carovalna oprema kat. III**

kat. III 0465 ANCI\_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)  
 Uredba Eu 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIP C - EN ISO 374-5:2016 - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009

**Medicinski pripomoček**

klasa I Uredba EU 2017/745 - EN 455 1,2,3 & 4  
 (CND T010201 NEKIRURŠKE ROKAVICE IZ LATEKSA)



Uredba ES 1935/2004 – Uredba EU 10/2011 – Min. odlok 21/03/73. Glede tovrstne uporabe natančno preberite izjavo o primernosti za stik z živili (DICA).

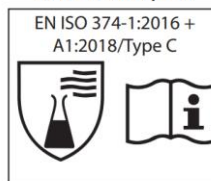
VELIKOSTI		
Koda/Številka	Dolžina, min(mm)	Širina, (±5 mm)
R40/ XS (6)		
R40/ S (7)	240	85
R40/ M (8)	240	95
R40/ L (9)	240	106
R40/ XL (10)	240	116

<b>Debelina mm</b>	Dlan (+/- 0,02)	0,07
--------------------	-----------------	------

<b>EN 455-2:2009/A1</b>	Natezna trdnost	≥6 N
-------------------------	-----------------	------

<b>EN ISO 374-5:2016</b>	Zaščita pred mikroorganizmi (bakterije in glivice)	Virusna zaščita ISO 16604:2004
	opravljeno	opravljeno

EN ISO 374-1:2016				
Kemična sestava:	KODA	EN 16523-1:2015 TIP C		EN 374-4:2013
		Stopnja učinkovitosti	Prebojni čas	% razgradnje
Natrijev hidroksid 40%	K	3	>60'	5%

**REG EU 2016/425**


TVEGANJA, PRED KATERIMI JE OVO ZASNOVANA ZA ZAŠČITO:

KODA	Zaščita
K Natrijev hidroksid 40%	CAS:1310-73-2 Zaščita pri uporabi anorganskih baz

**PRIPOROČILA ZA UPORABO** Večnamenska rokavica za zaščito rok in/ali ravnanje z izdelki in je namenjena tudi splošni uporabi ■ Podane informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na

REFLEXX S.P.A. UNIPERSONALE VIA PASSERI, 2 - 46019 VIADANA (MN) | TEL. + 39 0375 758891

 Cap.Soc. 1.200.000 € (i.v.) | PIVA 02085450209 | M5UXCR1 | R.E.A. 223166 | [info@reflexx.com](mailto:info@reflexx.com) [www.reflexx.com](http://www.reflexx.com)


5010014617

delovnem mestu in razlikovanje med zmesmi in čistimi kemičnimi snovmi ■ Kemična odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih samo z vzorci, ki so bili odvzeti izključno z dlani (razen v primerih, ko je rokavica enaka ali večja od 400 mm – kjer je predmet preizkusa tudi manšeta) in se nanaša samo na kemično testiranje. Ta se morda razlikuje, če se kemična snov uporablja v obliki zmesi ■ Priporočamo, da preverite, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od tipskega preizkusa glede na temperaturo, obrabo in razgradnjo. ■ Pri uporabi lahko zaščitne rokavice zagotavljajo manjšo odpornost proti nevarnim kemikalijam zaradi sprememb fizikalnih lastnosti. Premiki, luknje, odrgnine, razgradnja, ki so nastali zaradi stika s kemikalijami itd. lahko občutno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri korozivnih kemikalijah je razgradnja lahko najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, ki so odporne na kemikalije. ■ Pred uporabo preglejte rokavice, če so prisotne morebitne napake ali nepopolnosti ■ Prebojna odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša samo na testirani vzorec ■ **OPOZORILA** Pred uporabo izdelek preizkusite v dejanskih okoliščinah uporabe ■ Rokavica je pripomoček, ki je podvržen obrabi, zato je priporočljiva pogosta menjava in v vseh primerih, ko opazite nepravilnosti. ■ Rokavice nosite na suhih in čistih rokah ■ Izdelek vsebuje naravni lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije tipa I in IV zaradi preobčutljivosti. V primeru reakcije prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom ■ Uporabnik mora obvestiti proizvajalca in pristojni organ o kakršnihkoli incidentih, ki so se zgodili med uporabo varovalne opreme **SKLADIŠČENJE IN ODLAGANJE** Rokavice hranite v originalni embalaži na suhem mestu. ■ Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi in virom toplote. ■ Rok uporabe je 3 leta od datuma izdelave, ki je naveden na prodajni embalaži in velja za pravilno shranjen izdelek. ■ Rokavice je treba odlagati v skladu z lokalnimi predpisi ■ Izjava o skladnosti je na voljo na [www.reflexx.com](http://www.reflexx.com)